



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fileaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE DE TOILETTE CONFORT



Compatible avec
la tête amovible
et balainée
(TABAL-PF).




Cette sangle en U a été pensée pour faciliter la mise en place des patients aux toilettes et permet de baisser un pantalon très bas.

Elle dispose d'un plastron large, de mousses en sous-axillaire et de confort aux jambières. Le passage des jambières se fait de l'extérieur vers l'intérieur.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



STC-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



V02.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE DE TOILETTE CONFORT

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

S	A	51.5
	B	30
	C	113
M	A	55
	B	30
	C	125
L	A	59
	B	30
	C	138
XL	A	64
	B	30
	C	149

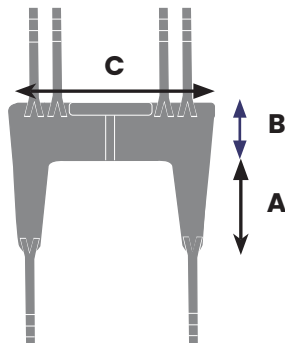

Composition

Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m3
Mousse polyéthylène
Mousse 100 kg/m3
Biais polyester 22 mm
Auto agrippant 100% Polyester

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personnes en quatre points:

1 - à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que les bourrelets soient sous les aisselles. Fermer le plastron.

En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer de l'extérieur de la cuisse vers l'intérieur l'attache du support de cuisse droit, procéder de même pour le support de cuisse gauche. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse, au fléau du lève-personnes.

2 - de part et d'autre du dossier

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible et baleinée TABAL-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TABAL-PF : La tête amovible et baleinée se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

Gestion de la fin de vie du produit





www.nausicaa-medical.com

This device is designed for hoists and ceiling-mounted lifts to transfer a person in a seated position.

It is compatible with lifts fitted with a smooth, open or closed hooking system, made to receive a 40 mm wide strap without affecting the strength of the strap on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a pin system.

COMFORT TOILET SLING



Available with removable headrest
(TABAL-PF).




This U-shaped sling has been designed to make it easier for patients to go to the toilet and allows very low trousers to be pulled down.

It has a wide front panel, sub-axillary foam and comfortable leg straps. The leggings are fitted from the outside inwards.



Before each use, it is important to check: that the label is present, that the stitching on the straps is not loose or unravelling, that the device has no tears, hooks, holes or signs of fraying (fabric and fastening straps), and that the buckles are not cracked or have weak fastenings.



STC-PF



Using of the device requires the presence and vigilance of a third party. In the event of use by an agitated or disorientated person, supervision becomes mandatory.

This medical device must be used or trained by a healthcare professional.



V02.07/26

Important Recommendations


- To ensure maximum effectiveness when using the products in this range, it is essential to :
 - choose the right size for the patient
 - fit the product as snugly as possible on the patient
- These products must not be placed in direct contact with damaged skin.



COMFORT TOILET SLING

SIZES & DIMENSIONS (in cm)

S	A	51.5
	B	30
	C	113
M	A	55
	B	30
	C	125
L	A	59
	B	30
	C	138
XL	A	64
	B	30
	C	149

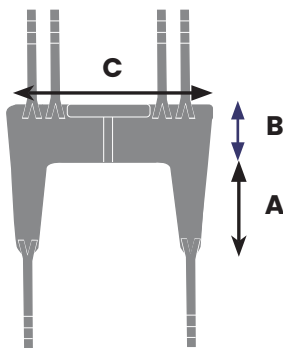

Composition
100% polyester jersey
Polyester webbing 40 mm - 1450 DaN
PE foam 50 kg/m³
Polyethylene foam 100 kg/m³
Polyester bias 22 mm
Self-gripping 100% Polyester

The backrest of this type of sling is made up of the wide part of the sling. The thigh supports are formed by the arms of the U shape.

This type of sling has a four-point system for attachment to the lift beam:

1 , at each end of the thigh supports.

Position the bottom of the backrest level with the shoulder blades so that the ears of the attachment system are on either side of the person. Pass the backrest sling under the wearer's arms so that the padding is under the armpits. Close the bib.

With the person's right leg slightly raised, pass the right thigh support clip inwards from the outside of the thigh. Do the same for the left thigh support. Hook the two ties of the backrest and the two ties of the thigh support to the beam of the lift.

2 , on either side of the backrest **ADJUSTMENTS**

The multiple ear attachment system allows the patient's sitting position to change.

ADJUSTMENTS :

The multiple ear attachment system allows the patient's sitting position to change.

CARE INSTRUCTIONS

Read the instruction guide before using the slings.

Always attach the slings to the lifting beam with the lugs at the same level.

Never adjust the hooking lugs on the lift beam when a person is in the sling.

Before lifting a person with the lift, make sure that the sling is properly hooked to the beam.

HEADREST INSTALLATION (OPTIONAL)

The removable, whalebone headrest TABAL-PF is available as an option on the eco toilet sling models, and is installed as follows:

TABAL-PF: The removable, whalebone headrest slides between the sling and the patient, protecting the cervical vertebrae when picking up from the floor, for example...

End-of-life management

