



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fileaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE DE TOILETTE



Compatible avec
la tête amovible
et balinée
(TABAL-PF).



Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau étroit et n'a pas de mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



STO-PF

V08.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE DE TOILETTE

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

S	A	67
	B	26
	C	78
M	A	85
	B	26
	C	95
L	A	90
	B	26
	C	108
XL	A	100
	B	26
	C	122

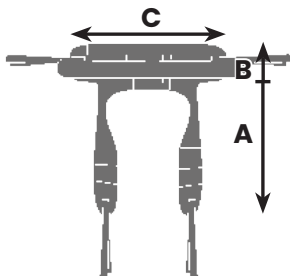

Composition

Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m3
Mousse polyéthylène
Biais polyester 40 mm
Auto agrippant 100% Polyester

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personnes en quatre points:

1 - à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que les bourrelets soient sous les aisselles. Fermer le plastron.

En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer de l'extérieur de la cuisse vers l'intérieur l'attache du support de cuisse droit, procéder de même pour le support de cuisse gauche. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse, au fléau du lève-personnes.

2 - de part et d'autre du dossier

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible et baleinée TABAL-PF et disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TABAL-PF : La tête amovible et baleinée se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

Gestion de la fin de vie du produit





www.nausicaa-medical.com

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

QUICK TOILET SLING



Compatible with
removable headrest
(TABAL).




Its enlarged U-shape completely clears the patient's buttocks, making it easier to position the patient on the toilet and to put the sling on and take it off.

This sling has a narrow headband and no back foam. The legs pass from the outside to the inside. This sling prevents constriction of the hips when used uncrossed.



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.



STO-PF



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

This medical device must be implemented or trained by a health professional.



V08.07/26

Important Recommendations :


- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.



QUICK TOILET SLING

SIZE & DIMENSIONS (in cm)

S	A	67
	B	26
	C	78
M	A	85
	B	26
	C	95
L	A	90
	B	26
	C	108
XL	A	100
	B	26
	C	122

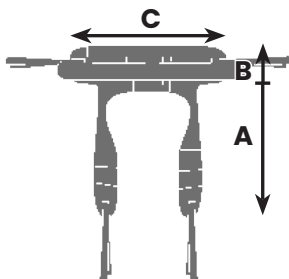

Composition
100% Polyester Fabric
50Kg/M3 PE foam
100% Polyester
20Kg/M3 35mm PE foam

The widest part of the sling constitutes the back of this type of sling. The branches of the U constitute the thigh support.

This type of sling has a 4 points hanging system to the spreader bar :

- 2 on both sides of the back
- 1 at each end of the thigh support.

Position the lowest part of the back on the shoulder blades, so that the hanging loops are positioned on both sides of the patient. Place the hanging loops under the patient's arm, so that the foam parts are positioned under the armpits. Close the chest loop.

Slightly raise the right leg of the patient, pass from the inside of the thighs outwards the loop of the right thigh support, do the same for the left thigh support. Hang both back loops and both thigh supports to the spreader bar.

ADJUSTMENTS :

The different loops on the hanging straps allow various sitting positions.

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

HEADREST INSTALLATION (OPTIONAL)

The removable, whalebone headrest TABAL-PF is available as an option on the eco toilet sling models, and is installed as follows:

TABAL-PF: The removable, whalebone headrest slides between the sling and the patient, protecting the cervical vertebrae when picking up from the floor, for example...

End-of-life management

