

SANGLES

NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqu  en France
dans nos ateliers
depuis 1992





Sangle de verticalisateur verticonfort

Descriptif

La sangle se positionne en bas du dos (au niveau des lombaires) en position assise.
La sangle doit  tre en tension et accroch e au 1er ou 2 me cran (vert ou jaune) sur le bras du verticalisateur.
Il est imp ratif de choisir la bonne taille correspondant au gabarit du patient.

Tailles

	S	M	L	XL
A	81	94	107	123
B	21	25	29	29

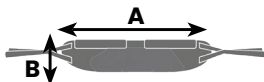

SVERTICONF-PF



V03.07/26

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

La sangle se positionne en bas du dos (au niveau des lombaires) en position assise.

La sangle doit être en tension et accrochée au 1^{er} ou 2^{ème} cran (vert ou jaune) sur le bras du verticalisateur.

Il est impératif de choisir la bonne taille correspondant au gabarit du patient.

Composition

- Jersey 100 % polyester
- Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
- Mousse PE 50 kg/m³
- Mousse PE 100 kg/m³
- Mousse polyuréthane 20 kg/m³
- Mousse polyuréthane 18 kg/m³
- Enduction polyuréthane sur polyester
- Biais polyester 40 mm
- Biais polyester 20 mm
- Auto-agrippant 100 % polyester

Mise en place

Ce dispositif est prévu pour les verticalisateurs permettant de transférer une personne en position debout.

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

Positionner le bas du dossier au niveau de la taille afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du verticalisateur.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Précautions d'usage

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du verticalisateur, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le verticalisateur, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

Gestion de la fin de vie du produit



SLINGS

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992





Verticonfort riser sling

Description

The strap is positioned at the bottom of the back (at the lumbar level) in a seated position. The strap must be taut and attached to the first or second notch (green or yellow) on the arm of the standing frame. It is essential to choose the correct size for the patient's build.

Sizes

	S	M	L	XL
A	81	94	107	123
B	21	25	29	29

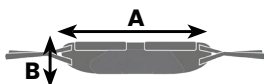

SVERTICONF-PF



V03.07/26

Recommendation



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

The strap is positioned at the bottom of the back (at the lumbar level) in a seated position. The strap must be taut and attached to the first or second notch (green or yellow) on the arm of the standing frame.

It is essential to choose the correct size for the patient's build.

Composition

- 100 % polyester jersey
- 40 mm polyester strap - 1450 DaN
- 50 kg/m³ PE foam
- 100 kg/m³ PE foam
- 20 kg/m³ polyurethane foam
- 18 kg/m³ polyurethane foam
- Coating polyurethane on polyester
- 50 mm polyester bias
- 20 mm polyester bias
- Self grip 100 % polyester

Set up

This device is intended for stand up lifts allowing to transfer a person in standing position. Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the straps, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fasteners

Position the bottom of the backrest around the body size in order that the ears of the attachment system are on either side of the person.

Hook the two fasteners of the backrest to the stand-up lift hooks.

SETTINGS

The fastening system, with multiple hangers, allows to adjust the position of the person.

Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

Caution

Read the instruction manual before using the slings.

The backrest hangers must be hung on the same color.

Never change the attachment setting of the ears to the stand-up lift hooks, when someone is installed in the sling.

Before lifting a person with the stand-up lift, make sure the sling is securely hooked to the hooks.

End-of-life management

