

SANGLES

NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992





Sangle en u éco

Descriptif

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
Taille unique.

TU	A	71
	B	67
	C	91

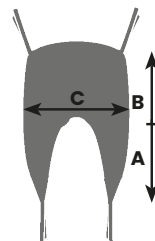

SUP3G-PF-TU / SUP3-PF-TU / SURP3-PF-TU / SURPC3-PF-TU

V02.07/26

Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Composition

- Jersey 100 % polyester
- Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
- Biais polyester 20 mm

Modèle confort:

- Mousse PE 50 kg/m3

Mise en place

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

Le dossier de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle. Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U. Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne mobile à quatre points :

- de part et d'autre du dossier.
- à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les suspentes du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne mobile.



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Précautions d'usage

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle. Avant de soulever une personne avec le lève-personne, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

Installation de la tête (option)

La tête amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



Gestion de la fin de vie du produit



SLINGS

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992





Universal eco sling

Description

Its U-shape avoids the placement of the sling under the patient's buttocks, making the installation and removal comfortable for the patient and accommodating for the caregiver.
One size.

TU	A	71
	B	67
	C	91

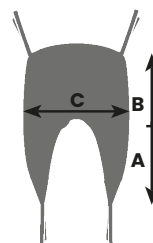

SUP3G-PF-TU / SUP3-PF-TU / SURP3-PF-TU

V02.07/26

Recommendation



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.

Composition

- 100% polyester fabric
- 40mm polyester strap - 1450 DaN
- 20mm polyester bias

Comfort model:
• 50kg/m³ PE foam

Set up

This device is intended lifts for transferring a person to a sitting position. It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.

The widest part of the sling constitutes the back of this type of sling. The branches of the U constitute the thigh support.

This type of sling has a 4 points hanging system to the spreader bar :

- on both sides of the back
- at each end of the thigh support.

Position the lower part of the sling at the coccyx so that the loops of the hanging straps are on both sides of the patient. Slightly raise the right leg of the patient, pass the right thigh support under the right thigh. Do the same for the left leg. Both hanging straps are positioned between the legs of the patient. Cross these hanging straps. Hang both hanging straps of the back and hanging straps of the thigh supports to the spreader bar.



Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary to get the best possible adjustment to the patient.
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

Caution

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

Installing the headrest (optional)

The TAMOV-PF removable headrest is available as an option on eco toilet sling models. It is installed as follows:

TAMOV-PF: The removable headrest slides between the sling and the patient, protecting the cervical spine when lifting from the floor, for example.



End-of-life management

