



Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE EN U PREMIUM



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF ou TAAT-PF).



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en œuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



SUBAS2-PF / SUBAI-PF / SUCBAS2-PF / SUCBAI-PF

V07.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE EN U PREMIUM

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

S	A	58
	B	54
	C	75
M	A	63
	B	58
	C	81
L	A	70
	B	61
	C	91
XL	A	77
	B	66
	C	102

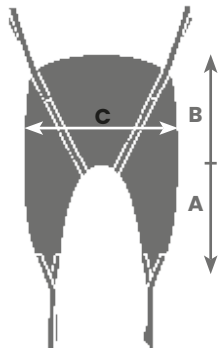

Compositions Modèles : Jersey/Jersey Confort

Jersey 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)

Biais polyester 40 mm

Composition Modèles : Filet / Filet Confort

Filet 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)

Biais polyester 40 mm

Le dossier de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne à quatre points :

- 1 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les suspentes du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne mobile.

- 2 de part et d'autre du dossier.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DES TÊTIÈRES (OPTION)

La têtière à attaches TAMOV-PF et la têtière amovible TAAT-PF sont disponibles en option sur les modèles de sangles hamac, l'installation de celles-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La têtière amovible se glisse entre la sangle et le patient.

TAAT-PF : Passer les bandes de tissu cousu sur les sangles dans les boucles de la têtière.

Vérifiez que les bandes soient bien tendues, accrocher les suspentes de la têtière au fléau de façon à ce que le patient puisse reposer sa tête confortablement.

Gestion de la fin de vie du produit





www.nausicaa-medical.com

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

U-SHAPED SLINGS



Compatible with
boned headrest
(TAMOV).



- CE certified and manufactured in France, the Comfort Sling is recommended for bed to chair to bed transfers and for "lifting from the floor" transfers in a lying position.
- Its U-shape avoids the placement of the sling under the patient's buttocks, making the installation and removal comfortable for the patient and accommodating for the caregiver.
- The leggings comfort foam reduces the shearing effect and the positioning of hooks at the shoulders level, traversing the entire slings dorsal part, avoids the phenomenon of compression during transfer.



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.



SUBAS2-PF / SUBAI-PF / SUCBAS2-PF / SUCBAI-PF

V07.07/26

Important Recommendations :

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.




U-SHAPED SLINGS

SIZES & DIMENSIONS (in cm)

	A	B	C
S	59	53	75
M	65	57	83
L	70	61	92
XL	75	65	102

Composition
100 % polyester fabric
40 mm polyester strap - 1450 DaN
Foam with polyester coating
50 kg/m³ PE foam
40 mm polyester bias

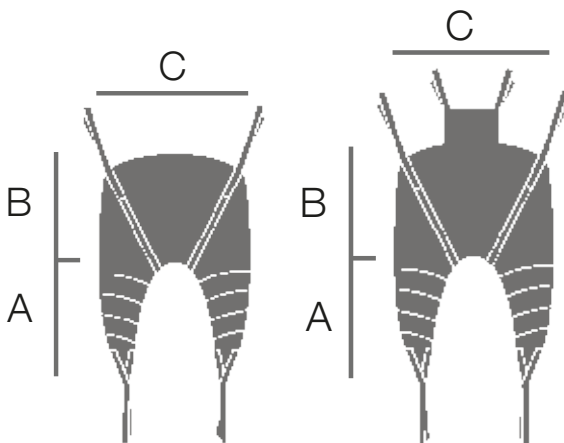

The widest part of the sling constitutes the back of this type of sling. The branches of the U constitute the thigh support.

This type of sling has a 4 points hanging system to the spreader bar :

- 1 at each end of the thigh support.

Position the lower part of the sling at the coccyx so that the loops of the hanging straps are on both sides of the patient. Slightly raise the right leg of the patient, pass the right thigh support under the right thigh. Do the same for the left leg. Both hanging straps are positioned between the legs of the patient. Cross these hanging straps. Hang both hanging straps of the back and hanging straps of the thigh supports to the spreader bar.

- 2 on both sides of the back

ADJUSTMENTS :

The different loops on the hanging straps allow various sitting positions.

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

Gestion de la fin de vie du produit

