

NAUSICAA

MEDICAL



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE HAMAC ÉCO



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF).




Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



HA-PF-TU / HAG-PF-TU / HA3-RBA-PF-TU



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



V02.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE HAMAC ÉCO

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

TU	A	74
	B	121

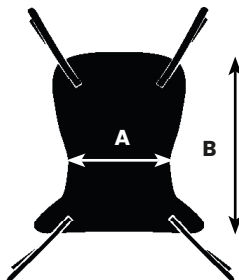

Modèle filet

Composition
Filet 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Biais sangle polyester 40 mm

Modèle tissu

Composition
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m3
Biais sangle polyester 40 mm

Modèle avec poignée

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

Gestion de la fin de vie du produit



This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

UNIVERSAL ECO HAMMOCK SLING




Compatible with
boned headrest
(TAMOV).



- CE certified and manufactured in France, the Universal Eco Hammock is recommended for “lifting from the floor” transfers in a lying position.
- Its simple and indented cut on the sides makes it the preferred sling to let it under the patient in a chair as it shows no thickness and folds which cause decubitus ulcers and discomfort.
- The installation must be done in bed in a lying position at 180° by practicing a lateralization.
- Moreover, it is preferred for the bath or shower, because it is made with a high tenacity polyester net in order to evacuate the water.



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.



HA-PF-TU / HAG-PF-TU / HA3-RBA-PF-TU



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

This medical device must be implemented or trained by a health professional.



V02.07/26

Important Recommendations :


- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.



UNIVERSAL ECO HAMMOCK SLING

SIZE & DIMENSIONS (in cm)

TU	A	74
	B	121

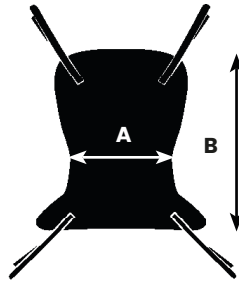

Composition
100% polyester fabric
40mm polyester strap - 1450 DaN
40mm polyester bias sling

Model with handle

- Lateralize the patient. Fold the hammock in two along the vertical axis.
- Place the fold along the vertical axis at the center of the patient's back.
- Place half of the sling on the free side of the patient.
- Fold the side of the sling on the side in support of the patient.
- Turn the patient on his back with half the sling resting on the free side.
- Lateralize again the patient on the previously free side of the sling.
- Release the previously folded part and spread it out.
- Place the patient on his back on the sling deployed.
- Hang the high and low hangers on the patient lift's spreader bar.

CAUTION

Read the instruction manual before using the slings.

The backrest hangers must be hung on the same color.

Never change the attachment setting of the ears to the stand-up lift hooks, when someone is installed in the sling.

Before lifting a person with the stand-up lift, make sure the sling is securely hooked to the hooks.

End-of-life management

