


SANGLES

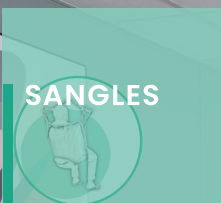

Sangle hamac

Descriptif

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés font d'elle une sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort sous les jambes réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

Préconisation

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



Composition

- Jersey 100% polyester /
- Filet 100% polyester
- Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
- Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)
- Biais polyester 40 mm




SHA2-PF / SHAC2-PF / SHA2BA-PF / SHAC2BA-PF

V07.06/26

Tailles et dimensions



	S	M	L	XL
A	62	66	74	83
B	96	104	113	121

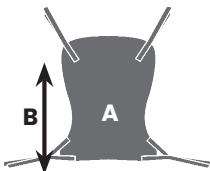

Tailles et dimensions en cm.

Mise en place

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du lève-personne.

Réglages

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Précautions d'usage

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur. Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du releveur mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle. Avant de redresser une personne avec le releveur mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

Installation de la tête (option)

La tête à attaches TAMOV-PF et la tête amovible TAAT-PF sont disponibles en option sur les modèles de sangles hamac, l'installation de celles-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient.

TAAT-PF : Passer les bandes de tissu cousu sur les sangles dans les boucles de la tête.

Vérifiez que les bandes soient bien tendues, accrocher les suspentes de la tête au fléau de façon à ce que le patient puisse reposer sa tête confortablement.



Gestion de la fin de vie du produit






Standard hammock sling

Description

Its simple cut and low-cut sides make it the ideal strap to leave under the patient in the chair, as it does not have any excess thickness or folds that can cause pressure sores and discomfort. The comfort foam under the legs reduces shear. It should be positioned in bed in a 180° supine position with lateralisation.

Recommendation

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. This medical device must be implemented or trained by a health professional.



Composition

- 100% polyester jersey / 100% polyester mesh
- 40 mm polyester strap - 1450 DaN
- 50 kg/m3 PE foam (Comfort model)
- 40 mm polyester bias binding




SHA2-PF / SHAC2-PF / SHA2BA-PF / SHAC2BA-PF

V07.06/26

Sizes

	S	M	L	XL
A	62	66	74	83
B	96	104	113	121

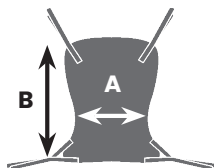

Set up

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position. It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.

- Turn the patient onto their side. Fold the hammock in half along the vertical axis.
- Position the fold along the vertical axis in the middle of the patient's back.
- Place half of the strap on the patient's free side.
- Fold the side of the strap on the patient's support side.
- Turn the patient onto their back with half of the strap placed on the free side.
- Turn the patient back onto their side on the strap on the previously free side.
- Unfold the previously folded part and spread it out.
- Place the patient on their back on the unfolded strap.
- Attach the upper and lower slings to the middle of the LP.



ADJUSTMENTS

The multiple hanging straps allow various positions : sitting, semi-sitting or lying position.

Important recommendations

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.

Caution

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level. Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling. Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

Installation of headrest (option)

The TAMOV-PF headrest with fasteners and the TAAT-PF removable headrest are available as options on hammock strap models. They are installed as follows:

TAMOV-PF: The removable headrest slides between the strap and the patient.

TAAT-PF: Pass the fabric straps sewn onto the straps through the loops on the headrest.

Check that the straps are taut, then attach the headrest suspension straps to the spreader bar so that the patient can rest their head comfortably.



End-of-life management

