



Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE HAMAC SANS CROISEMENT



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF ou TAAT-PF).



C'est une sangle hamac hybride en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle fait office de hamac percé.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



SUCPEHA2-PF / SUCBAHA2-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



V07.08/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.



SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

S	A	41
	B	56
	C	61
M	A	48
	B	56
	C	68
L	A	51
	B	63
	C	76
XL	A	54
	B	65
	C	96

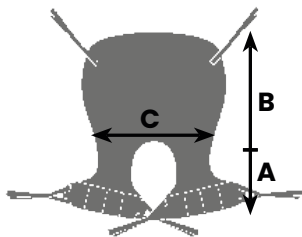

Compositions Modèle : Jersey Confort

Jersey 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)

Biais polyester 40 mm

Composition Modèle : Filet Confort

Filet 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m3 (Modèle confort)

Biais polyester 40 mm

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DES TÊTIÈRES (OPTION)

La têtière à attaches TAMOV-PF et la têtière amovible TAAT-PF sont disponibles en option sur les modèles de sangles hamac, l'installation de celles-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La têtière amovible se glisse entre la sangle et le patient.

TAAT-PF : Passer les bandes de tissu cousu sur les sangles dans les boucles de la têtière.

Vérifiez que les bandes soient bien tendues, accrocher les suspentes de la têtière au fléau de façon à ce que le patient puisse reposer sa tête confortablement.

Gestion de la fin de vie du produit





This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.


HAMMOCK WITHOUT CROSSING SLINGS



- CE certified and manufactured in France, the Comfort Hammock Without Crossing is recommended for bed to chair to bed transfers for amputees and for "lifting from the floor" transfers in a lying position with the addition of headrest.
- It is a hammock sling with a U-shape which avoids the placement of the sling under the patient's buttocks, making the installation and removal comfortable for the patient and accommodating for the caregiver.
- Moreover, this sling avoids hips tightness and the foam leggings reduce the pressures exercised on the thighs.



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.



SUCPEHA2-PF / SUCBAHA2-PF

V07.08/26

Important Recommendations :

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.





HAMMOCK WITHOUT CROSSING SLINGS

SIZES & DIMENSIONS (in cm)

	A	B	C
S	41	53	75
M	46	57	83
L	50	61	92
XL	55	66	102

Composition
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³
Biais polyester 40 mm

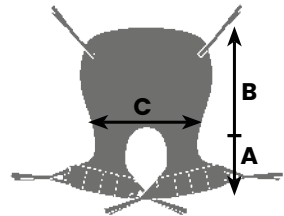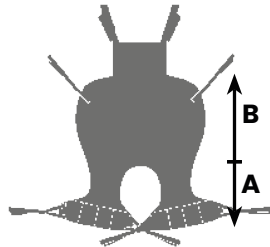

Place the patient in recovery position. Fold the hammock in 2 part by respecting the vertical axis.

- Position the fold according the vertical axis in the middle of the patient's back.
- Put the half sling on the patient's free side.
- Fold the extreme side of the sling supporting by the patient
- Reverse the patient on his back with the half sling places on the free side
- Recover the patient on the sling on side previously available
- Release the part previously folded and spread it
- Place the patient on his back on the sling deployed
- Hook the top lines and the bottom lines in the middle of the patient hoist

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

End-of-life management

