



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

SANGLE EN U À RÉGLAGE RAPIDE



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF).




Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

Retirer les baleines aluminium avant de mettre la sangle dans une machine à laver.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



SST-PF / SML-PF / SSTBA-PF / SMLBA-P

V04.07/26

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	SST	SML
S	A 59	B 58
	B 62	C 85
	C 60	
M	A 67	B 67
	B 68	C 93
	C 64	
L	A 65	B 74
	B 78	C 93
	C 71	
XL	A 70	B 80
	B 72	C 100
	C 90	

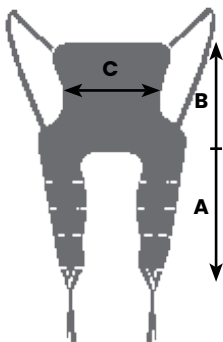

Compositions Modèles : Jersey/Jersey Confort
Jersey 100 % polyester
Mousse PE 150 kg/m³ (Modèle confort)
Sangles 100 % polyester

Composition Modèles : Filet / Filet Confort
Filet 100 % polyester
Mousse PE 150 kg/m³ (Modèle confort)
Sangles 100 % polyester

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-malade en quatre points :

- 2 de part et d'autre du dossier,
- 1 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personnes.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La tête amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TAMOV-PF : La tête amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

Gestion de la fin de vie du produit





www.nausicaa-medical.com

This device is intended lifts and ceiling-mounted lifts for transferring a person to a sitting position.

It is compatible with lifts equipped with a smooth, open or closed hook system, being able to receive a 40 mm wide sling without impacting the strength of the sling on beams ranging from 2 to 4 points, which excludes hooking with a metal plate with holes.

QUICK ADJUST U SHAPE SLING



Compatible with
removable headrest
(TAMOV).



- CE certified and manufactured in France, the Fast Adjustable Comfort Sling is recommended for bed to chair transfers requiring a management of the head support.
- We recommend using it for bed to chair transfers requiring a management of the head support (with the addition of removable headrest).



Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitching of the straps, that they do not fray or come undone, that the device has no tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and attachment straps), that the buckles are not cracked or have weak attachments.

Remove the aluminium bar before putting the sling in the washing machine.



SST-PF / SML-PF / SSTBA-PF / SMLBA-PF



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.

This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 V04.07/26

Important Recommendations :

- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.




QUICK ADJUST U SHAPE SLING

SIZES & DIMENSIONS (in cm)

	A	B	C
S	57	62	54
M	61	67	65
L	65	69	76
XL	70	71	86

Composition
100% Polyester Fabric
150Kg/M3 PE foam
Sling 100% Polyester

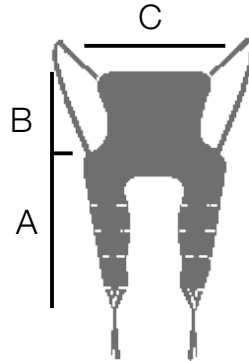

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.
Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.
Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.
Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

End-of-life management

