



*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.
Par mesure d'hygiène et par respect envers le protocole sanitaire, les articles textiles qui ont été ouverts
ne sont ni repris ni échangés.*

SANGLE DE TOILETTE ÉCO



Compatible avec
la tête amovible
et balinée
(TABAL-PF).

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle. Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité. Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.



STORP3-PF



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



v 06.02/2022

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE DE TOILETTE ÉCO

TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

TU	A	78
	B	25
	C	107

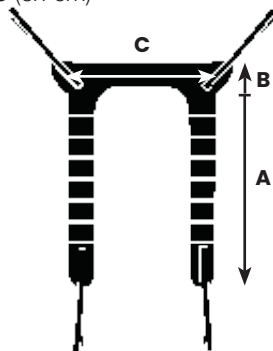

Composition
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle. Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U. Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personnes à quatre points:

1) à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que le bourrelet soit sous les aisselles.

En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer de l'extérieur de la cuisse vers l'intérieur l'attache du support de cuisse droit, procéder de même pour le support de cuisse gauche. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse, au fléau du lève-personnes.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles. Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La têtière amovible et baleinée TABAL-PF et disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit:

TABAL-PF : La têtière amovible et baleinée se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

v 06.02/2022



CE DISPOSITIF MEDICAL DOIT ÊTRE MIS EN OEUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTE



*Prior to each use, it is important to check the status of the device: seams, state of the straps and of the fabric.
Any damage will either be repaired by NAUSICAA Medical, or will result in a disposal.
As a hygiene measure and out of respect for the health protocol, textile items that have been opened*

UNIVERSAL ECO TOILET SLING




Compatible with
boned headrest
(TABAL).



**THIS MEDICAL DEVICE MUST BE
IMPLEMENTED BY A TRAINED
HEALTH PROFESSIONAL**



The Universal Eco Toilet Sling is recommended for toilet and daily change transfers. Its extended U-shape completely frees the patient's buttocks thus facilitating the positioning to the toilet, and improving the installation and removal of the sling.



STORP3-PF-TU

v 06.02/2022

Important Recommendations :


In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary to get the best possible adjustment to the patient. These products must not be in direct contact with a wounded skin.



UNIVERSAL ECO TOILET SLING

SIZE & DIMENSIONS (in cm)

TU	A	78
	B	25
	C	107

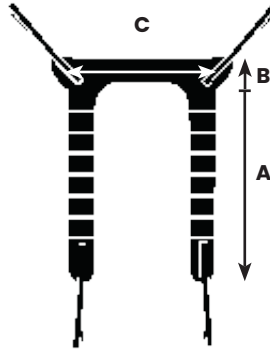

Composition
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³

INSTRUCTIONS FOR USE

DO NOT USE THIS SLING IF THE SIZE IS NOT SUITABLE FOR THE PATIENT.

The backrest of this type of strap, is constituted by the wide part of the strap.

The thigh supports, meanwhile, are constituted by the branches of the U.

This type of strap has a hanging system to the flail of the lift in four points:

1 at each end of the thigh supports.

Position the bottom of the backrest at the level of the shoulder blades so that the ears of the system of attachment are on both sides of the person. Pass the fasteners of the back splash under the arms of the person, so that the bead is under the armpits.

While slightly lifting the right leg of the person, pass from the outside of the thigh inward the attachment of the right thigh support, proceed similarly for the support of left thigh. Hook the two backrest fasteners and the two thigh support clips to the flail of the lift.

CAUTION

Read the instructions for use before using the sling.

Hang to the spreader bar the loop which are at the same level.

Do not change any adjustment while the patient is hanging in the sling.

Before lifting a patient, ensure that the sling is correctly hooked on the spreader bar.

v 06.02/2022



**THIS MEDICAL DEVICE MUST BE SET UP BY A PROFESSIONAL
OR THE USER MUST BE EDUCATED TO SET IT UP**