NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon état de l'autoagrippant.

ATTACHES



ATTACHE DE POIGNETS

USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ



ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ



ATTACHE DE CHEVILLES

USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT

⚠

La contention présente un caractère exceptionnel et doit être limitée dans le temps (nécessite une prescription médicale). Elle doit être accompagnée d'une évaluation régulière des bénéfices/risques et d'une surveillance accrue des patients. Elle doit être manipulée uniquement par du personnel formé et qualifié à son utilisation. En cas de mauvaise utilisation, il y a un risque d'accident pour le patient.

⚠

L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne.
En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'un formation par un professionnel de santé.

LMATPO2-PF / LMATPOS2-PF / LMATCH2-PF

V08.08/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Recommandations importantes
• Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

ATTACHES

Composition :
ATTACHE DE POIGNETS
Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-aggripant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :
ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ
Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Auto-aggripant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :
ATTACHE DE CHEVILLES
Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-aggripant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :


ATTACHE DE POIGNETS
USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ

Mettre le poignet, côté fourrure, dans le bracelet.
A l'aide de l'auto-agrippant, fermer le bracelet.
Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.
Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.

ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ
USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ

• Passer la sangle se trouvant à l'extrémité pointue du bracelet, dans la fente (1).
• Faire passer le poignet de la personne à travers cette boucle (2).
• Ajuster à la taille du poignet à immobiliser, et fermer le bracelet à l'aide de l'auto-agrippant. Puis passer cette sangle dans la boucle (2).
• Nouer les sangles autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.



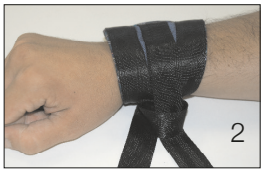

ATTACHE DE CHEVILLES
USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT

Mettre chaque cheville, côté fourrure, dans chaque bracelet.
A l'aide de l'auto-agrippant, fermer chaque bracelet.
Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-cheville.
Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.

Gestion de la fin de vie du produit

NAUSICAA
MEDICAL

Made in France
since 1992

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient support and positioning. It is not a restraint system. Before each use, it is important to check: the presence of the label, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying and the good condition of the hook and loop.

FASTENERS



PADDED WRIST

LIGHT WRISTS SUPPORT FOR LOW-RESTLESSNESS PATIENTS



SECURITY WRIST FASTENERS

FOR A STRONGER CONTENTION FOR VERY AGITATED PATIENTS



ANKLE FASTENERS

MAINTAINS THE PATIENT'S ANKLES, WHILE ALLOWING FREEDOM OF MOVEMENT.

⚠

Restraint is exceptional and must be limited in time (requires a medical prescription). It must be accompanied by a regular assessment of the benefits/risks and increased patient monitoring. It should only be used by staff who are trained and qualified in its use. In the event of incorrect use, there is a risk of accident to the patient.

⚠

The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.
This medical device must be implemented or trained by a health professional.

2424 70 ®

LMATPO2-PF / LMATPOS2-PF / LMATCH2-PF

V08.08/26

Matériaux textiles conformes à la législation REACH sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Piot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE

CE

Important Recommandations :

• In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :

- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient

• These products must not be in direct contact with a wounded skin.

FASTENERS

Composition :
PADDED WRIST FASTENER
Combination of polyurethan foam and jersey/ cotton polyester fabric 100 % polyester fur
100 % polyester velcro strap
100 % polyester strap
Nylon buckle

Composition :
SECURITY WRIST FASTENER
Combination of polyurethan foam and jersey/ cotton polyester fabric 100 % polyester velcro strap
100 % polyester strap

Composition :
ANKLE FASTENER
Combination of polyurethan foam and jersey/ cotton polyester fabric 100 % polyester fur
100 % polyester velcro strap
100 % polyester strap
Nylon buckle


PADDED WRIST FASTENER

LIGHT WRISTS SUPPORT FORR LOW-RESTLESSNESS PATIENTS

Set the wrist, on the fur side, in the bracelet.
With the help of the velcro, close the bracelet.
Wrap the strap around the object serving for fastening the fastener wrist.
Adjust the length of the belt with the nylon loop.

SECURITY WRIST FASTENER



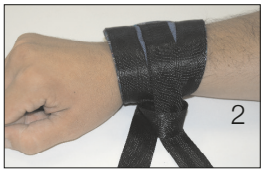

FOR A STRONGER CONTENTION FOR VERY AGITATED PATIENTS.

Route the strap located at the sharp end of the bracelet into the slot (1).
Get the wrist of the person through this loop (2).
Fit to immobilize the wrist and close the bracelet using the Velcro, then move the strap through the loop (2).
Tie the straps around the object serving as fixing the security wrist fastener.

ANKLE FASTENER

MAINTAINS THE PATIENT'S ANKLES, WHILE ALLOWING FREEDOM OF MOVEMENT.

Set each ankle, on the fur side, in each bracelet.
Using the velcro, close each bracelet.
Route the strap around the object serving for fastening the ankle fastener.
Adjust the length of the belt with the nylon loop.

End-of-life management