


*Il est important de vérifier l'état du dispositif : coutures, état du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par Nausicaa Médical, soit une mise au rebut.*

## DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**

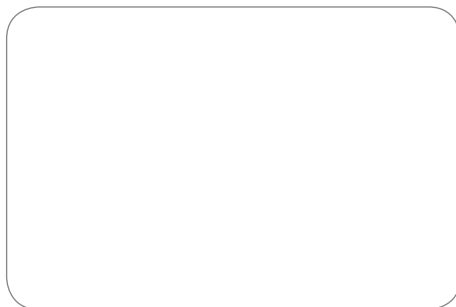

DTR-PF

# DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES

GAMME HOSPITALIÈRE  
Chaîne et trame 100 % polyamide  
Enduction silicone 1 face  
Poignées 100 % polyester

## DESCRIPTION

- Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse avec Poignées est un dispositif qui facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques
- L'addition des poignées et l'effet de glisse facilitent le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.
- Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone), les deux faces de tissu en contact coulissant l'une sur l'autre.

## EXEMPLE D'UTILISATION



v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ