

# GAMME FLYER

GARANTIE  
5 ANS

CE

Made  
in  
France

**La gamme FLYER est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.**

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds et d'un châssis pliant.

Ils sont à la fois très maniables et dotés d'une grande qualité de roulage sur tout type de revêtement tout en conservant une garde au sol suffisamment basse pour passer même sous les lits Alzheimer.

TRANSFERTS



## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



### FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS


#### AVANTAGES :

- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol



### BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES

- **2 FONCTIONS OU 4 FONCTIONS** (lorsque l'option écartement électrique est choisie) avec affichage du niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier

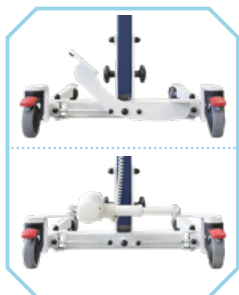

### ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- **MÉCANIQUE**
- **ÉLECTRIQUE**, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm



### ROUES

- **4 ROUES DOUBLES** 75 mm
- **2 ROUES SIMPLES FREINÉES** 100 mm
- **GARDE AU SOL** : 85 mm

## ACCESSOIRES D'INDICATION DE POIDS



Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg dans un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le modèle choisi (page 37).

La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il sera monté prévaut sur celle de l'accessoire.



Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec un système d'accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (page 37) et nécessite un kit d'adaptation supplémentaire.

Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

## BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 84 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.