

Easy/er5

*Un Verticalisateur haut de gamme
et innovant pour un soin de qualité*



EASYLEV 5



5
ANS
Garantie

CE
Certifié

L'EASYLEV 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en tant que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appui-genoux ergonomique et le cale-talons amovible, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



NOUVEAUTÉS



BRAS DE LEVAGE RÉGLABLE

S'adapte à la morphologie du patient pour une verticalisation plus efficace :

- 3 longueurs différentes, plus des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplegiques par exemple)



POIDS MAXIMAL PATIENT

Une capacité améliorée :

- Il permet de gérer des patients jusqu'à 180 kg (au lieu de 150 kg sur les modèles précédents)



BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE

Respecte la posture du patient :


- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures)



APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE

Plus rapide, plus simple et plus confortable :

- Sans contrainte de positionnement, ni de réglage
- Sa conception permet de réduire les pressions exercées durant les phases de levage,
- Possibilité de bloquer les jambes grâce à la sangle appui-mollets

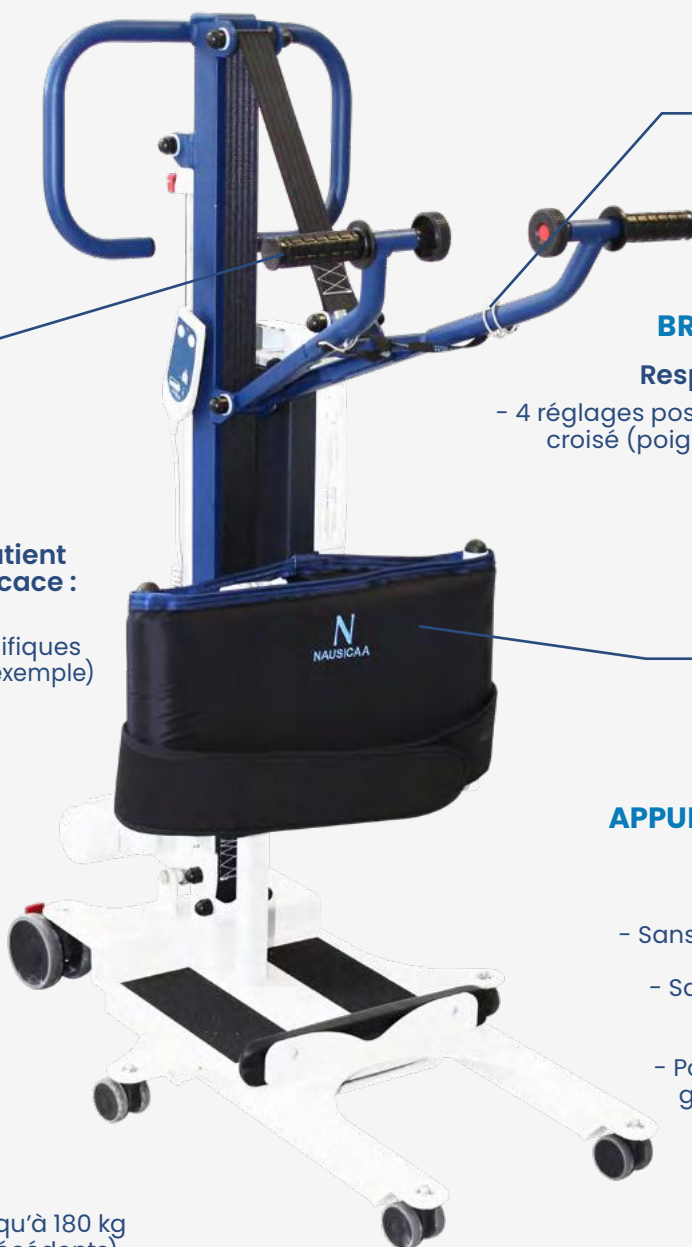

La gamme EASYLEV 5 se décline en 3 modèles différents :

EASYLEV 5 COMPACT



Sa très faible garde au sol (6.5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques 6 roues.

Son faible encombrement lui permet de s'adapter à tous les espaces (même exigus, comme des WC).

EASYLEV 5 ECP (Écartement Manuel)



Son large piètement à écartement mécanique lui permet une largeur d'ouverture de 90 cm le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.

EASYLEV 5 PLUS (Écartement Électrique)



Son piètement à écartement électrique (100 cm) aide le travail des aidants (pour les patients bariatriques par exemple).

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 300 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

2
ANS
Garantie

SANGLE SOUS-AXILLAIRE



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course, gérant ainsi le buste du patient.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Made
in
France
Qualité

KIT EASYLEV 5 (pour EASYLEV 2 uniquement)

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d'améliorer vos EASYLEV 2 en EASYLEV 5 grâce aux kits disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale.



ROULETTES



VÉRIN & BRAS DE LEVAGE
+ SANGLE DE TRACTION



APPUI-GENOUX