


NAUSICAA

Médical

Blue Easy/er

*Un Verticalisateur
au mouvement breveté
pour un confort inégalé*

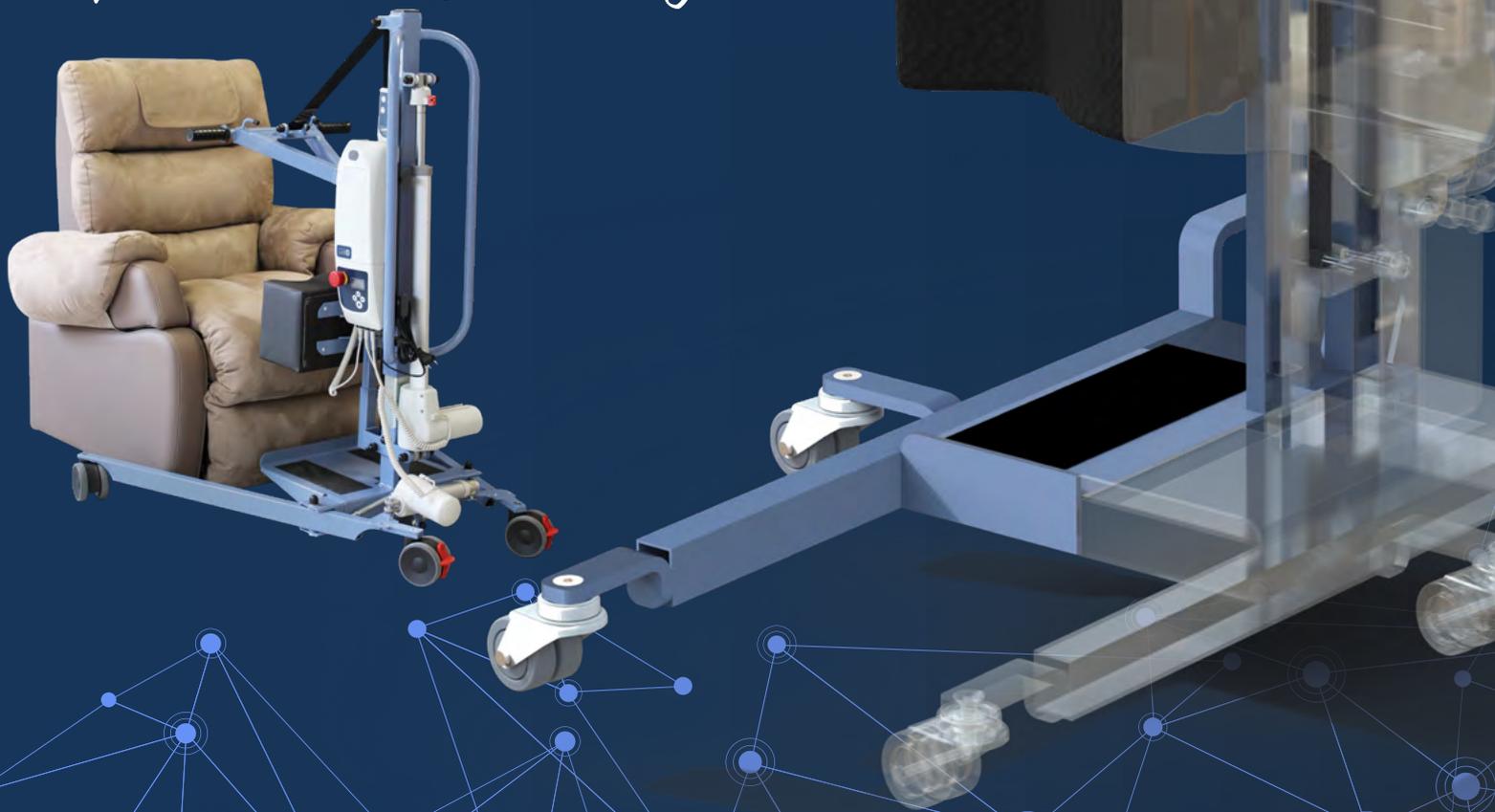

BLUE EASYLEV



5
ANS
Garantie

CE
Certifié

La gamme BLUE EASYLEV répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Elle utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.



01 BRAS DE LEVAGE AVEC
1 RÉGLAGE STANDARD
- Poignées fixes ergonomiques



02 GUIDON AMÉLIORÉ
- Manipulation plus aisée et
meilleure maniabilité durant
la totalité du transfert



03 SYSTÈME D'ACCROCHES
- Attaches sécurisées avec
ses crochets recourbés dans
le sens opposé de celui de la
traction de la sangle



04 CALE-TIBIA
- En mousse confortable
et réglable en hauteur



05 ROUES
- Roues doubles freinées & non
freinées 75 & 100 mm
- Roues doubles 75 & 50 mm



POIDS MAXIMAL PATIENT

Une capacité permettant de gérer des patients jusqu'à 150 kg.



La gamme BLUE EASYLEV se décline en 3 versions différentes :

BLUE EASYLEV



Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.

BLUE EASYLEV (Écartement Mécanique)



Son piètement à écartement mécanique (88 cm) ou électrique (90 cm) lui permet une largeur d'ouverture le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils.

BLUE EASYLEV (Écartement Électrique)



BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 80 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond à la réalité de l'utilisation.

2
ANS
Garantie

SANGLES CONSEILLÉES



SANGLE SOUS-AXILLAIRE

Spécialement pensée pour être utilisée avec le mouvement EASYLEV, cette sangle est disponible en plusieurs tailles : S, M, L ou XL.

SANGLE ÉCO

Modèle économique de sangle pour verticalisateurs ; cette sangle est disponible uniquement en taille unique.



Made
in
France
Qualité

Elles se positionnent au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course, gérant ainsi le buste du patient. Le réglage d'accroches se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.