

GAMME BLUE EASYLEV

GARANTIE 5 ANS CE Made in France

Un mouvement breveté pour un confort inégalé


La gamme BLUE EASYLEV répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Elle utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

Tous les appareils de cette gamme sont équipés de toutes les fonctionnalités d'un lève-personne haut de gamme afin d'effectuer des transferts en douceur depuis un lit, une chaise confort, un siège de toilette ou un fauteuil roulant.

TRANSFERTS

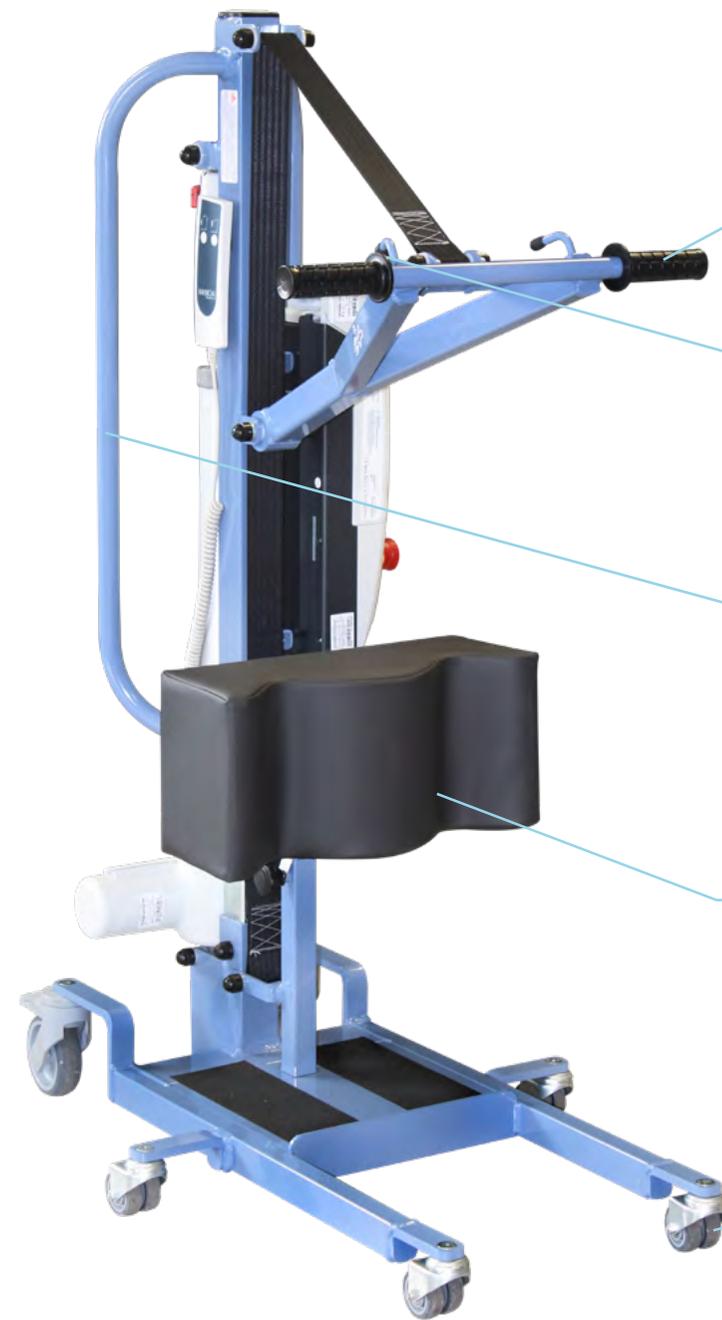

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



BRAS DE LEVAGE I RÉGLAGE STANDARD

- Poignées fixes ergonomiques



SYSTÈME D'ACCROCHE

- Crochets sécurisés et recourbés dans le sens opposé de celui de la traction de la sangle



GUIDON AMÉLIORÉ

- Pour une manipulation plus aisée et une meilleure maniabilité durant la totalité du transfert



CALE-TIBIA

- En mousse confortable et réglable en hauteur



ROUES

- ROUES DOUBLES FREINÉES & NON FREINÉES 75 & 100 mm
- ROUES DOUBLES 75 & 50 mm

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d'améliorer votre BLUE EASYLEV grâce au KIT ROUES et au KIT PLUS disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale.

KIT ROUES



- Améliore le roulement de votre appareil avec :
- 4 roues doubles 50 mm
 - 2 roues doubles freinées : 100 mm
- La garde au sol est ainsi réduite à 65 mm

KIT PLUS



Facilite l'utilisation de l'appareil par le soignant grâce à l'ajout :

- d'un système d'écartement électrique des pieds qui apporte aux soignants un confort supplémentaire (mais réduit la largeur d'écartement de 10 cm)
- d'une télécommande 4 fonctions
- d'un affichage de niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier + doublement des commandes sur le boîtier

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 300 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.