

### FICHE PRODUIT

## VERTICALISATEUR **BLUE WAYUP 3 ECP** **MECANIQUE ET ELECTRIQUE SECABLE**

#### Descriptif :



- Chassis acier
- Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total version ECP mécanique : 32 kg
- Poids total version ECP électrique : 35 kg
- Poids de la partie haute : 16,40 kg (avec un axe et deux molettes)
- Poids de l'embase ECP méca : 15,60 kg (avec l'autre axe et deux molettes)
- Poids de l'embase ECP élec : 18,60 kg (avec l'autre axe et deux molettes)
- Charge maximale : 150 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans\* (hors partie électrique)
- \* Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie
- Batterie plomb : 1 an de garantie


- Dispositifs médicaux (règlement (UE) 2017/745)
- Compatibilité électromagnétique
- Conformité aux normes suivantes :
  - NF EN 60601-1 : A1/2013
  - NF EN 60601-1-2 : 2015
  - NF EN ISO 10535 : 2021
- Moteur à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 6 000 N
- Force de poussée maximale vérin d'écartement des pieds : 3 000 N
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V =
- Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre

#### Caractéristiques techniques motorisation :

- Boîtier de contrôle avec batterie intégrée
- Affichage par voyant lumineux de l'autonomie
- Cordon Secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 2 fonctions Protection IPX4 (version ECP méca)
- Télécommande 4 fonctions Protection IPX4 (version ECP élec)
- Descente d'Urgence : électrique et manuelle
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie

#### Caractéristiques dimensionnelles :


- A.** Longueur totale : 100 cm
- B.** Hauteur utile mini : 74,5 cm
- C.** Hauteur utile maxi : 117 cm
- D.** Hauteur totale : 99 cm
- E.** Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F.** Largeur embase mini : 57 cm
- G.** Largeur embase maxi : écartement mécanique : 81 cm / écartement électrique : 80 cm
- H.** Diamètre de giration : 112 cm

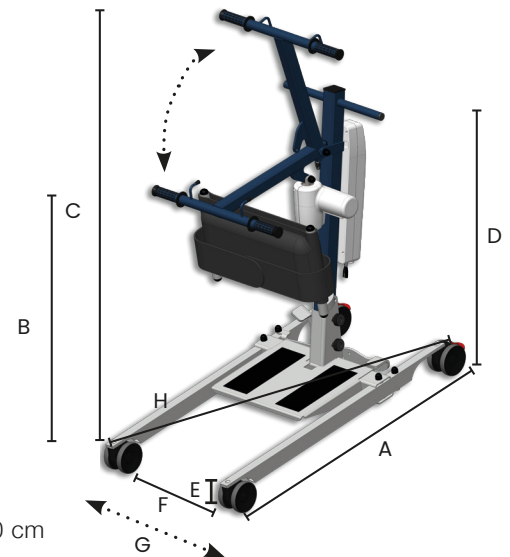

#### Stockage :

Afin d'optimiser la place dans vos entrepôts, nous vous proposons de rendre votre appareil plus compact lors de son stockage. Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Monter le bras de votre verticalisateur d'environ 5 cm à l'aide de la télécommande.
- Desserer la vis de maintien et baisser le mât de votre verticalisateur vers le sol.

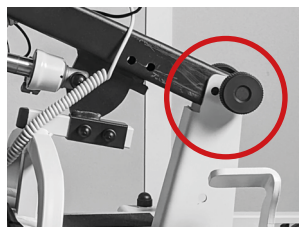

- Insérer une feuille de papier ou carton entre le repose-pieds et l'appui-tibia afin que l'antidérapant du repose-pieds n'abîme pas le textile de l'appui-tibia.
- Passer la sangle velcro de votre appui-tibia sous le repose-pieds afin que l'appareil reste fermé lors de son stockage debout.

