

FICHE PRODUIT

VERTICALISATEUR **WAY UP'GO ECP**

Descriptif :



- Ecartement des pieds électrique rapide, en seulement 3 secondes. Il s'adapte à tous type de fauteuils
- Maniabilité et roulage améliorés par la présence d'une roue centrale sous le patient
- Assistance motorisée permettant un déplacement sans aucun effort en charge
- Amortissement de la plateforme pour un franchissement de seuil amélioré
- Pliable, sécable et stockable debout
- Chassis acier
- Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
- Peinture époxy au four
- Poids total version ECP : 40,20 kg
- Roues à roulement à billes
- Poids de la partie haute : 17,40 kg (avec un axe et deux molettes)
- Poids de l'embase ECP : 22,80 kg (avec l'autre axe et deux molettes)
- Charge maximale : 180 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans* (hors partie électrique)
- * Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie

- Dispositifs médicaux (règlement (UE) 2017/745)
- Conformité aux normes suivantes :
 - NF EN 60601-1 : 2006 A1/2013
 - NF EN 60601-1-2 : 2015
 - NF EN ISO 10535 : 2021
 - Compatibilité électromagnétique
- Moteurs à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 8 000 N
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V
- Protection contre les surcharges par thermostats
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre

Caractéristiques techniques motorisation :


- Boîtier de contrôle avec batterie grande capacité amovible
- Indication graduée de la charge batterie
- Affichage par voyant lumineux de l'autonomie
- Chargeur secteur 220V-24V
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 6 fonctions Protection IPX4 (montée/descente, avance/recul, ouverture des pieds/fermeture des pieds)
- Descente d'urgence : électrique et manuelle
- Branchement chargeur secteur pour charge de la batterie

Caractéristiques dimensionnelles :

- A. Longueur totale : 1065 mm
- B. Hauteur utile mini : 950 mm
- C. Hauteur utile maxi : 1160 mm
- D. Hauteur totale (hors télécommande) : 946 mm
- E. Hauteur du châssis : 112 mm
- F. Largeur embase mini : 565 mm (fermé)
- G. Largeur embase maxi : 1100 mm (ouvert)
- H. Diamètre de rotation : 1080 mm
- I. Garde au sol : 40 mm

En stockage plié debout (voir photo ci-contre) :

- A. Largeur : 550 mm
- B. Profondeur : 555 mm
- C. Hauteur : 1200 mm

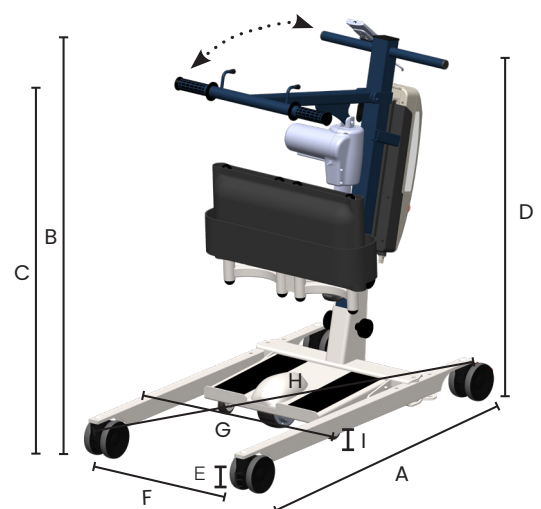

Photos non contractuelles

Emballage : 1000x600x600 mm (empilable jusqu'à trois produits)

- Palette 800x1200 mm : jusqu'à 3 produits
- Palette 1000x1200 mm : jusqu'à 6 produits