

FICHE PRODUIT

LEVE-PERSONNE NAUSIFLY 4

COMPACT

Descriptif :

- Chassis acier
- Tôles, tubes et profilés découpés au laser et pliés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total (méca) : 38 kg
- Poids total (élec) : 38 kg
- Charge maximale : 160 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans* (hors partie électrique)
- * Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie

- Dispositif médical (règlement (UE) 2017/745)
- Compatibilité électromagnétique
- Conformité aux normes suivantes :
 - NF EN 60601-1 : A1/2013
 - NF EN 60601-1-2 : 2015
 - NF EN ISO 10535 : 2021
- Moteur à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 6 000 N
- Force de poussée maximale vérin d'écartement des pieds : 2 000 N (ECP élec)
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 5V
- Protection contre les surcharges par thermo-rup-teurs
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre maximum



Caractéristiques Techniques Motorisation :


- Boîtier de contrôle avec batterie amovible
- Affichage digitale de l'autonomie
- Cordon secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 2 fonctions Protection IPX4 (version ECP méca)
- Télécommande 4 fonctions Protection IPX4 (version ECP élec)
- Descente d'urgence : électrique et manuelle
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie

Caractéristiques Dimensionnelles :

- A.** Longueur totale : 1028 mm
- B.** Hauteur utile mini : 390 mm
- C.** Hauteur utile maxi : 1690 mm
- D.** Hauteur totale : 1298 mm
- E.** Hauteur du châssis : 113 mm
- F.** Largeur embase mini : 567 mm
- G.** Largeur embase maxi : 810 mm
- H.** Diamètre de giration : 1069 mm
- I.** Garde au sol : 63 mm

En stockage plié debout (voir photo ci-contre) :

- A.** Largeur : 567 mm
- B.** Profondeur : 420 mm
- C.** Hauteur : 1158 mm

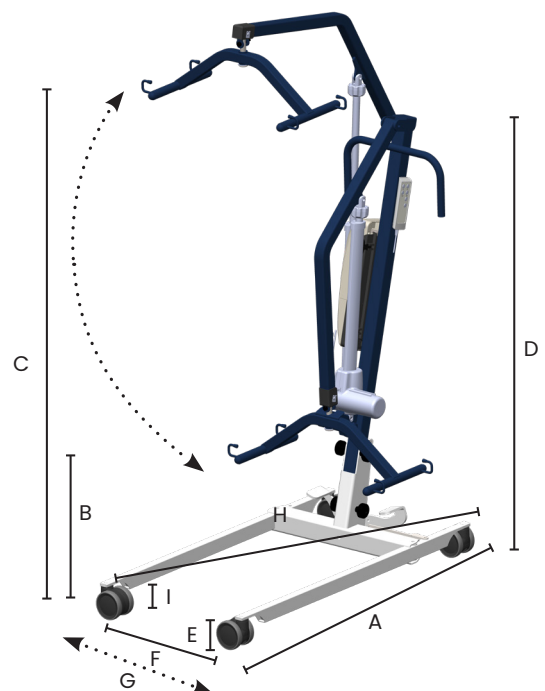

Emballage : 1200 x 800 x 500 mm

Palette : 800 x 1200 mm : empilable jusqu'à 4 produits